


pneuven medi 8.14 6.7

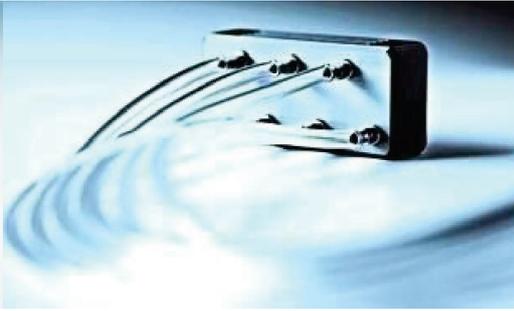

+ FACILE À UTILISER

Commandes tactiles simples.
Grand écran LCD. Disque flash
USB pour le stockage des
données.

+ 2 en 1

Pressothérapie et thérapie par le
vide dans un seul appareil.
Drainage lymphatique. Cupping.
Microdermabrasion au diamant.

+ GAGNER DU TEMPS

Disque flash programmable. Stockage
des thérapies préférées et lancement
rapide de ces programmes. Logiciel
d'évaluation de l'efficacité des
traitements.

+ VARIABILITÉ

Programmes individuels pour chaque
utilisateur. Modification immédiate
des paramètres (pression) au cours
de la thérapie.

+ SAVOIR COMMENT

Tous les programmes préétablis ont
été développés et testés en
collaboration avec des experts
médicaux de premier plan dans les
domaines de la lymphologie, de la
dermatologie, de la médecine
sportive et de la rééducation.

L'appareil PNEUVEN MEDI fonctionne sur le principe du drainage par compression séquentielle et est destiné à la thérapie dans les établissements médicaux et les centres de rééducation professionnelle. Il est principalement utilisé dans les domaines de l'angiologie, de la phlébologie, de la lymphologie, de la dermatologie et de la rééducation thérapeutique. La thérapie proprement dite s'effectue à l'aide de manchons à chambres multiples (3, 7, 11, 14, 21) pour délivrer les effets de la pression sur les différentes parties du corps.

THÉRAPIE PAR PRESSION

- lympoedème
- l'œdème après des blessures
- insuffisance veineuse
- prophylaxie de la thrombose veineuse
- varices, artère conditions post-opératoires
- troubles circulatoires (phénomène de Raynaud, acrocyanose)
- Détente
- gonflement dû à un traumatisme ou à une intervention chirurgicale
- resserrer le muscle relâché et restaurer la flexibilité de la fibre musculaire

CONTRE-INDICATIONS

- œdème dû à une insuffisance cardiaque
- insuffisance hépatique
- gonflement dû à une maladie du foie, à des tumeurs malignes
- grossesses
- thrombose
- hypotension
- accident vasculaire cérébral
- grossesse
- épilepsie
- allergies et œdèmes
- fractures, abcès, inflammation
- stimulateur cardiaque

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique
Puissance absorbée
Adaptateur

Capacité de pompage
Pression réglable
Pression de vide réglable

Poids
Dimensions

Durée de la thérapie

Sorties
Les programmes

Mode de fonctionnement

Vide pression aspiration

A utiliser

pneuen medi 8.14 lymphothérapie profi

DC 24 V, 1,5 A
36 VA (W)
GSM 36E 24, puits moyen 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,9-0,45 A
max. 30 l/min
max. 30kPa Limité à 12kPa
0 - 25 kPa
7 300 g
321,0 x 321,5 x 140,3 mm
0 -120 min ou 0 - 100 cycles
14
86 BASIC
Basique et dégradé
OUI
Lymphothérapie,
phlébothérapie, thérapie par le vide

pneuen medi 6.7 la lymphothérapie à domicile

DC 24 V, 1,5 A
36 VA (W)
GSM 36E 24, puits moyen 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,9-0,45 A
max. 30 l/min
Limité à 12kPa
-
5 000 g
321,0 x 321,5 x 140,3 mm
0 -120 min ou 0 - 100 cycles
7
58 BASIC
Basique et dégradé
PAS
Lymphothérapie, phlébothérapie


Lymphothérapie

- 58 ou 86 programmes de base, pétrissage et programmes combinés pour le massage des extrémités et de leurs parties.
- Le mode BASIC où la vitesse des ondes de pression et la pression résultante dans toutes les chambres du manchon sont constantes.
- Le mode GRADIENT, dans lequel la vitesse des ondes de pression est constante et la pression sélectionnée dans les chambres à manchon diminue de la périphérie vers le centre.
- L'appareil peut être contrôlé manuellement à l'aide de boutons tactiles ou en insérant une clé USB dans l'appareil. Le disque flash peut être programmé pour n'importe quel programme préétabli et stocker les données de chaque thérapie. L'application destinée aux médecins permet d'évaluer l'efficacité du traitement d'un patient. Les paramètres de la thérapie peuvent être ajustés pendant que l'appareil fonctionne, sans qu'il soit nécessaire d'interrompre le cycle de traitement ou de le reprogrammer.

Accessoires

- Applicateurs de lymphé : manchon de jambe (tailles standard et XL), manchon de bras, manchon de bras avec épaule, manchon de pantalon, manchon pour les hanches et la région lombaire, manchon de bras - gilet, 7-14-21 canaux, un tube de connexion.
- Applicateurs sous vide : Applicateurs en verre avec ouverture, sans ouverture.
- Applicateurs pour la microdermabrasion.

Le fabricant dispose d'un système de qualité certifié selon EN ISO 13 485:2016 et EN ISO 9001:2015 dans le domaine de la production, de la vente et de l'entretien des dispositifs PNEUVEN.

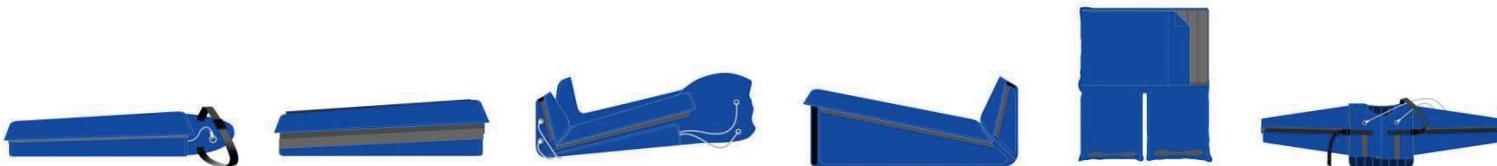

PRODUCTEUR

EKOVUK MEDI, s.r.o.
République tchèque
www.pneuen.cz
info@pneuen.cz

pneuen

DISTRIBUTEUR

Advanced Medical Solutions s.r.o.
République tchèque www.amsolutions.cz
obchod@amsolutions.cz

A Advanced
Medical
Solutions